


MOTOR UNIT US-06

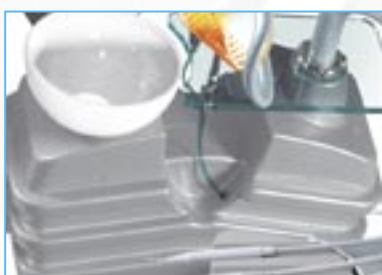

Firma Famed Żywiec S.A. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, oferuje do sprzedaży dwa nowe unity opracowane na bazie cieszącego się ogromną popularnością na wszystkich wystawach stomatologicznych w kraju oraz poza jego granicami, modelu studyjnego Motor unitu. Konstrukcja unitu wzorowana na budowie motocykla, unikalne wzornictwo oraz perfekcyjne wykonanie, czynią ten produkt doskonałą propozycją dla stomatologów.

Motor unit z całą pewnością przyciągnie do gabinetów stomatologicznych rzeszę pacjentów – od najmłodszych do najstarszych.

PULPIT: wyposażony w hamulec mechaniczny i system zapobiegający powrotowi wody z końcówek. Istnieje możliwość rozbudowy do 4 rękawów „od góry”. Unit posiada programowalny czas napełniania kubka i omywania misy spluwaczki. Czujnik ciśnienia wody zabezpiecza unit przed uszkodzeniem.

STOLIK NARZĘDZIOWY (WERSJA ORTODONTYCZNA): Umieszczony na obrotowym ramieniu, wyposażenie: 3 lub 6-funkcyjna dmuchawko-strzykawka, lampa polimeryzacyjna, skaler (opcja), kaniule ssaka, klawiatura sterująca funkcjami zestawu.

BLOK SPLUWACZKI: odchylany o 90°, misa porcelanowa wymiowana do sterylizacji, punkt napełniania kubka zimną wodą, wewnętrzny obieg wody destylowanej, ssak do mokrej pompy, separator amalgamatu (opcja), filtr wodny, zawór antyskażeniowy.

TACA NA NARZĘDZIA: na odchylanym wysięgniku z możliwością regulacji wysokości, zdejmowana.

LAMPA OŚWIETLENIOWA: halogenowa, bezcieniowa, zawieszona na ramieniu pantografowym, załączanie i wyłączanie lampy ze stolika narzędziowego oraz przełącznikiem umieszczonym na głowicy lampy.

FOTEL STOMATOLOGICZNY: dostosowany do pracy z boku, duży zakres regulacji wysokości, podgłówek dwuprzegubowy, sterowanie ze stolika narzędziowego, skrzynka przyłączeniowa, tapicerka bezszwowa łatwa w dezynfekcji.